

dermalight® 500

A variálható UV-fényterápiás rendszer



Kivitel:

dermalight® 500

(Készülék, állítható támasszal)

dermalight® 500-1

(Állvány, felülre szerelt készülékkel)

dermalight® 500-2

(Állvány 2 készülékkel,
1 alulra, 1 pedig felülre szerelve)

dermalight® 500-3

(Állvány 3 készülékkel,
1 alulra, 1 középre és 1 felülre szerelve)

Technikai adatok (alapkészülék):

Méretek (H x Sz x M):

480 x 320 x 120 mm

Súly: kb. 8 kg

Hálózati csatl.: 230 V/50 Hz

Technikai adatok (állvány):

Méretek (H x Sz x M):

610 x 550 x 1100 mm

Magasságállítás: 110 cm

Súly: kb. 6 kg

Gyártói tanúsítvány:

CE 0123

Gyártói besorolás:

WEEE-Reg.-Nr.: DE 14312030

Dr. Hönle orvosi készülékek

A Dr. K. Hönle Medizintechnik GmbH egy több mint 30 éve működő bajor vállalkozás, amely specializálta magát bőrbetegségek kezelésére alkalmas magas minőségű és értékű, UV-fényterápiás készülékek kifejlesztésére, gyártására és forgalmazására. A bőrgyógyászokkal való szoros együttműködésnek köszönhetően a kezelések optimalizálásra kerültek, a mellékhatások így a minimumra csökkentek.

Az intenzív tapasztalatszere az orvosokkal, betegekkel és forgalmazókkal, a készülékek permanens javulásához vezet és lehetővé teszi új termékek kifejlesztését. A piacon ezek a készülékek számítanak a leginnovatívabbnak. Minőségüket biztosítja a DIN EN ISO 13485 tanúsítvány. Minden készülék rendelkezik a szükséges, az orvosi készülékekre vonatkozó EU-irányelv 93/42 EWG által meghatározott CE jelzéssel.

A felhasználókkal folytatott rendszeres konzultáció, amely a vevők és páciensek elégedettségére engednek következtetni, lehetővé teszi a gyors és közvetlen, főleg igény szerinti reagálást. A termékpalalettában megtalálhatók mind a kis felületek, mind pedig a teljes test kezelésére alkalmas eszközök, kabinok és diagnosztikai készülékek. Minden termék a legmagasabb minőségben, ennek ellenére elérhető áron, Németországban kerül legyártásra. Különös figyelmet szenteltünk a készülékek egyszerű és biztonságos kezelésére, hogy a legkülönbözőbb terápiás módszerek eredményes kezelése alkalmazható legyen a teljes indikáció-spektrumra.

A forgalmazás és a szerviztevékenység világszerte partnercégeken keresztül történik, amelyek a saját hazájukon belüli értékesítésért és vevőszolgálatért felelősek. Intenzív továbbképzések biztosítják a folyamatos és magas színvonalú kompetenciát.

Dr. K. Hönle Medizintechnik GmbH

Viktor-Frankl-Straße 20
86916 Kaufering

Telefon: 0 81 91/3 05 55-0
Telefax: 0 81 91/3 05 55-50

E-Mail: medizin@drhoenle.de
Internet: www.drhoenle.de

dermalight® 500

A variálható UV-fényterápiás készülék
a kéz, a láb, az arc és a többi testrész kezelésére



dermalight® 500

A variálható UV-fényterápiás készülék

Különleges tulajdonságok:

- mikroprocesszoros vezérlés dózis-határértékkel, biztonsági kapcsolóval
- választható idő-és dózisvezérlés
- üzemidő-számláló
- kombináltan alkalmazható fényterápiás készülék
- a speciális reflektorok rövid kezelési időt biztosítanak
- a fénycsövek előtt lévő akrilüveg véd a közvetlen érintéstől, valamint higiénikus és egyszerűen tisztítható
- alapkészülék, 4 különböző pozícióba állítható támaszra szerelve
- léptékmentes magasságállítás a gázrugónak köszönhetően (az állvánnyal rendelkező rendszereknél)
- görgős és helytakarékos készülékállvány
- integrált biztonsági kapcsoló a túlmelegedés ellen
- megfelel a törvényi előírásoknak és normáknak
- modern és működési igényeknek megfelelő dizájn
- 4 év szavatossági idő



A dermalight® 500 rendszer


A dermalight® 500, mint alapkészülék, ill. a System dermalight® 500-2, vagy 500-3 2, vagy 3 készülék állványra szerelt kombinációja, amely így a különböző testrészek fényterápiás kezelésére alkalmas. A dermalight® 500 optimális kialakításának köszönhetően hatásosan kezelhetők a kéz, a láb, a mellkas, a hát, a far vagy a térd felületei.

A dermalight® 500 rendszer a 3 alapkészülékkel, és a görgős és magasság-állítható állvánnyal könnyen variálható és rugalmas beállítási lehetőségeket biztosít. Ennek köszönhetően lehetővé válik a kezek, a lábak és a további testrészek egyidejű kezelése, kényelmes ülő testhelyzetben.


Köszönhetően az állítható állványkaroknak, az egyes sugárzóelemek pontosan abba a pozícióba állíthatók, ahol a besugárzásra szükség van.

Az állványra szerelt rendszer esetében a felső sugárzóelem külső vezérlőegysége 180°-ban elfordítható, melynek köszönhetően a készülék vezérlése annak pozíciójától és sugárzási irányától függetlenül is elvégezhető.


Variálható és sokoldalúan felhasználható

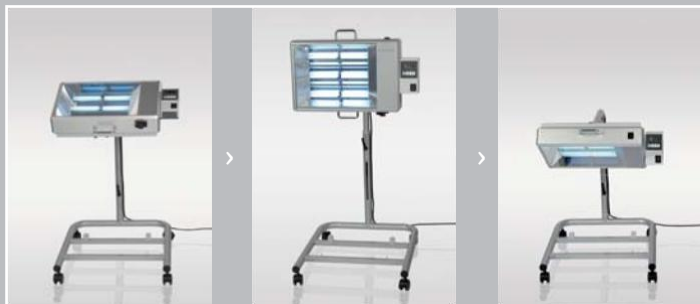

dermalight® 500-1 állvány 1 készülékkel

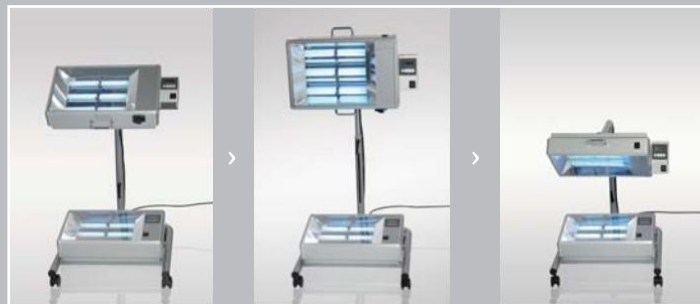

dermalight® 500-2 állvány 2 készülékkel

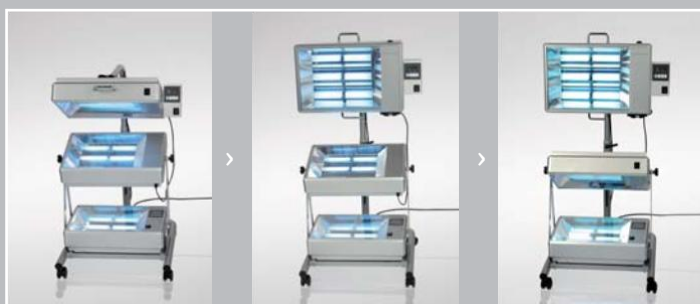

dermalight® 500-3 állvány 3 készülékkel

A dermalight® 500 rendszer

A dermalight® 500 rendszer a görgős és magasság-állítható állványnak köszönhetően könnyen variálható és rugalmas beállítási lehetőségeket biztosít, akár különböző UV-sugárzókkal szerelve is rendelhető.

Pontos dózisbeállítás

Az integrált mikroprocesszoros vezérlés lehetővé teszi a pontos kezelési idő, illetve dózis beállítását. A fénycsövek a kiválasztott kezelési idő lejártát követően automatikusan lekapcsolnak, ezzel biztosítva a túladagolás elkerülését. A kezelés megszakítása esetén a vezérlés a fennmaradó időt tárolja.

A magas UV-intenzitásnak köszönhetően a kezelési idő minimalizálható, amely meggátolja az erythemképződést és csökkenti a kumulatív dózist.



A moduláris dermalight® 500-as rendszer

A dermalight® 500 egy moduláris rendszer, ezáltal könnyen bővíthető. Az alapkészülék rendszerré bővítésére bármikor lehetőség nyílik egy görgős, magasságban állítható állvány és további 1, és/vagy 2 másik sugárzóelem megvásárlásával.

Indikációk:

- PUVA-terápia
- Psoriasis (Pikkelysömör)
- Neurodermitis
- Vitiligo
- Atópiás dermatitis
- Akne
- stb.

Fénycsőtartományok:

- Szélessávú UV-A (PUVA)
- Speciális UV-A1
- Szélessávú UV-B (SUP)
- Keskenysávú UV-B/311 nm

Magyarországon forgalmazza

MEDILAS
...medizintechnische Innovationen

Medilas Kereskedelmi Kft.

1089 Budapest, Baross u. 133.

Tel.: +36 1 477 01 30 Fax: +36 1 477 01 32

www.medilas.hu mail@medilas.hu